

CE-KY-01-0202

SMS-01A-01



Urinary Catheters for Single Use (Foley)

[Product characteristic]

Direction for use

“KANGYUAN ” Urinary Catheters for Single Use (Foley) is made of imported silicon rubber by advanced technology. The product has smooth surface, slight stimulation, large apocensis volume, reliable balloon, convenient to use safely, multiple of types and specification for choice.

[Applicability]

The product can be clinically used to urinate and douche urinary bladder by inserting into urinary bladder though urethra.

[Specification]

REF	Tip	Size	Balloon (ml)	Length (mm)	Material	Lumen
ED-101003-SL	Nelaton, central hole	10Fr	Integrated	3	310	Silicone 2-way
ED-101205-SL	Nelaton, central hole	12Fr	Integrated	5	400	Silicone 2-way
ED-101405-SL	Nelaton, central hole	14Fr	Integrated	5	400	Silicone 2-way
ED-101610-SL	Nelaton, central hole	16Fr	Integrated	10	400	Silicone 2-way
ED-101810-SL	Nelaton, central hole	18Fr	Integrated	10	400	Silicone 2-way
ED-102010-SL	Nelaton, central hole	20Fr	Integrated	10	400	Silicone 2-way
ED-102210-SL	Nelaton, central hole	22Fr	Integrated	10	400	Silicone 2-way
ED-102410-SL	Nelaton, central hole	24Fr	Integrated	10	400	Silicone 2-way
ED-100803	Nelaton	8Fr	Integrated	3	310	Silicone 2-way
ED-101003	Nelaton	10Fr	Integrated	3	310	Silicone 2-way
ED-101205	Nelaton	12Fr	Integrated	5	400	Silicone 2-way
ED-101405	Nelaton	14Fr	Integrated	5	400	Silicone 2-way
ED-101610	Nelaton	16Fr	Integrated	10	400	Silicone 2-way
ED-101810	Nelaton	18Fr	Integrated	10	400	Silicone 2-way
ED-102010	Nelaton	20Fr	Integrated	10	400	Silicone 2-way
ED-102210	Nelaton	22Fr	Integrated	10	400	Silicone 2-way
ED-102410	Nelaton	24Fr	Integrated	10	400	Silicone 2-way
ED-440603	Nelaton	6Fr	Normal	1,5-3	310	Silicone 2-way
ED-440803	Nelaton	8Fr	Normal	3	310	Silicone 2-way
ED-441005	Nelaton	10Fr	Normal	5	310	Silicone 2-way
ED-441210	Nelaton	12Fr	Normal	10	400	Silicone 2-way
ED-441410	Nelaton	14Fr	Normal	10	400	Silicone 2-way
ED-441610	Nelaton	16Fr	Normal	10	400	Silicone 2-way
ED-441810	Nelaton	18Fr	Normal	10	400	Silicone 2-way
ED-442010	Nelaton	20Fr	Normal	10	400	Silicone 2-way
ED-442210	Nelaton	22Fr	Normal	10	400	Silicone 2-way
ED-442410	Nelaton	24Fr	Normal	10	400	Silicone 2-way
ED-401205	Tiemann	12Fr	Integrated	5	400	Silicone 2-way
ED-401405	Tiemann	14Fr	Integrated	5	400	Silicone 2-way
ED-401610	Tiemann	16Fr	Integrated	10	400	Silicone 2-way
ED-401810	Tiemann	18Fr	Integrated	10	400	Silicone 2-way
ED-402010	Tiemann	20Fr	Integrated	10	400	Silicone 2-way
ED-402210	Tiemann	22Fr	Integrated	10	400	Silicone 2-way
ED-402410	Tiemann	24Fr	Integrated	10	400	Silicone 2-way

[Direction for use]

- Lubrication: Generously lubricate tip and shaft of the catheter before insert.
- Insert: Carefully insert catheter tip into the bladder (normally indicated by urine flow), and then a further 3cm to ensure balloon is also inside it.
- Inflating water: **Using a syringe without needle, inflate balloon with sterile distilled water or 5% - 10% glycerin aqueous solution is supplied.** Recommended volume to use is marked on funnel of catheter.
- Extraction: For deflation , cut off the inflation funnel above the valve, or using a syringe without needle push into valve to facilitate drainage.

UT_IPU-TUL-EN_Rev2.0 (11-23)

CE-KY-01-0202

SMS-01A-01

5. Dwell catheter: the dwelling time is as the requirement of clinic and nurse.


[Contraindication]

The unsuitable condition considered by doctor.

[Precaution]

- Do not use ointments or lubricants having a petroleum base.
- Different specification of urethral catheter should be chose as different ages prior to use.
- This product had been sterilized by ethylene oxide gas, and discard after single use.
- If packing is damaged, do not use.
- The size and balloon capacity is marked on outer unit pack and funnel of catheter.
- The guide wire for the auxiliary intubation in the drainage channel of the catheter is pre placed in the children.
- In use, such as the discovery of urinary catheter, urinary extravasation, inadequate drainage, catheter replacement should be applicable specifications timely.
- This product should be operated by medical staff.
- Indwelling time recommend no more than 28 days.

[Symbol]

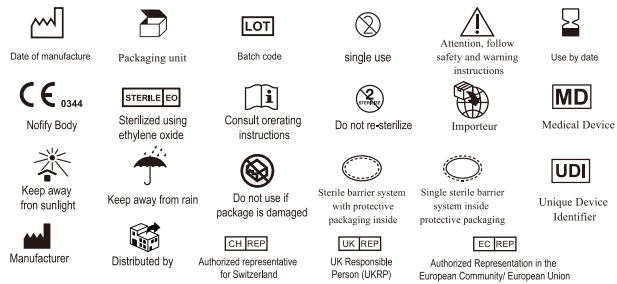

[Warning]

The injection of sterile water shall not exceed the nominal capacity on the catheter (ml).

[Storage]

Store in a cool, dark and dry place, the temperature should not higher than 40 °C , without corrosive gas and good ventilation.

[Date of manufacture]

See inner packing label

[expiry date]

See inner packing label

[Importer]

Urotech GmbH

Medi-Globe-Str. 1-5

83101 Rohrdorf Germany

[Distributor]

Urotech GmbH

Medi-Globe-Str. 1-5, 83101, Achenmühle, Deutschland

www.urovision-urotech.de

[Registered person]

Manufacturers: HAIYAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.

Address: Songpodong Road, Shendang Town 314311, Haiyan, Zhejiang China

Tel: 0086-0573-86725881 0086-0573-86725885 Fax: 0086-0573-86725888

Eunitor GmbH

Kennedydamm 5 40476 Düsseldorf Germany

Obelis Swiss GmbH

Ruessenstrasse 12, 6340 Baar/ZG, Switzerland

MedPath Limited

27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX

[Publication date] 2023-11-10

UT_IPU-TUL-EN_Rev2.0 (11-23)

CE-KY-01-0202

SMS-01A-01



Harnkatheter für den einmaligen Gebrauch (Foley)

[Produkteigenschaften]

“ KANGYUAN ” Harnkatheter für den einmaligen Gebrauch (Foley) ist aus importiertem Silikonkathetenschuk mit fortschrittlicher Technologie hergestellt. Das Produkt hat eine glatte Oberfläche, leichte Stimulation, großes Apocensis-Volumen, zuverlässigen Ballon, bequem, sicher zu verwenden, mehrere Arten und Spezifikationen zur Auswahl.

[Anwendbarkeit]

Das Produkt kann klinisch zum Urinieren und Spülen der Harnblase verwendet werden, indem es durch die Harnröhre in die Harnblase eingeführt wird.

[Angaben]

REF	Spitze	Größe	Ballon (ml)	Länge (mm)	Material	Lumen
ED-101003-SL	Nelaton, zentrales Loch	10Fr	Integriert	3	310	Silikon 2-Wege
ED-101205-SL	Nelaton, zentrales Loch	12Fr	Integriert	5	400	Silikon 2-Wege
ED-101405-SL	Nelaton, zentrales Loch	14Fr	Integriert	5	400	Silikon 2-Wege
ED-101610-SL	Nelaton, zentrales Loch	16Fr	Integriert	10	400	Silikon 2-Wege
ED-101810-SL	Nelaton, zentrales Loch	18Fr	Integriert	10	400	Silikon 2-Wege
ED-102010-SL	Nelaton, zentrales Loch	20Fr	Integriert	10	400	Silikon 2-Wege
ED-102210-SL	Nelaton, zentrales Loch	22Fr	Integriert	10	400	Silikon 2-Wege
ED-102410-SL	Nelaton, zentrales Loch	24Fr	Integriert	10	400	Silikon 2-Wege
ED-100803	Nelaton	8Fr	Integriert	3	310	Silikon 2-Wege
ED-101003	Nelaton	10Fr	Integriert	3	310	Silikon 2-Wege
ED-101205	Nelaton	12Fr	Integriert	5	400	Silikon 2-Wege
ED-101405	Nelaton	14Fr	Integriert	5	400	Silikon 2-Wege
ED-101610	Nelaton	16Fr	Integriert	10	400	Silikon 2-Wege
ED-101810	Nelaton	18Fr	Integriert	10	400	Silikon 2-Wege
ED-102010	Nelaton	20Fr	Integriert	10	400	Silikon 2-Wege
ED-102210	Nelaton	22Fr	Integriert	10	400	Silikon 2-Wege
ED-102410	Nelaton	24Fr	Integriert	10	400	Silikon 2-Wege
ED-440603	Nelaton	6Fr	Normal	1,5-3	310	Silikon 2-Wege
ED-440803	Nelaton	8Fr	Normal	3	310	Silikon 2-Wege
ED-441005	Nelaton	10Fr	Normal	5	310	Silikon 2-Wege
ED-441210	Nelaton	12Fr	Normal	10	400	Silikon 2-Wege
ED-441410	Nelaton	14Fr	Normal	10	400	Silikon 2-Wege
ED-441610	Nelaton	16Fr	Normal	10	400	Silikon 2-Wege
ED-441810	Nelaton	18Fr	Normal	10	400	Silikon 2-Wege
ED-442010	Nelaton	20Fr	Normal	10	400	Silikon 2-Wege
ED-442210	Nelaton	22Fr	Normal	10	400	Silikon 2-Wege
ED-442410	Nelaton	24Fr	Normal	10	400	Silikon 2-Wege
ED-401205	Tiemann	12Fr	Integriert	5	400	Silikon 2-Wege
ED-401405	Tiemann	14Fr	Integriert	5	400	Silikon 2-Wege
ED-401610	Tiemann	16Fr	Integriert	10	400	Silikon 2-Wege
ED-401810	Tiemann	18Fr	Integriert	10	400	Silikon 2-Wege
ED-402010	Tiemann	20Fr	Integriert	10	400	Silikon 2-Wege
ED-402210	Tiemann	22Fr	Integriert	10	400	Silikon 2-Wege
ED-402410	Tiemann	24Fr	Integriert	10	400	Silikon 2-Wege

[Gebrauchsanweisung]

- Schmierung: Spitze und Schaft des Katheters vor dem Einführen großzügig einschmieren.
- Einführen: Führen Sie die Katheterspitze vorsichtig in die Blase ein (normalerweise durch Urinfluss angezeigt) und dann weitere 3 cm, um sicherzustellen, dass sich der Ballon ebenfalls in der Blase befindet.
- Wasser aufpumpen: Mit einer Spritze ohne Nadel den Ballon mit sterilem destilliertem Wasser oder 5%, 10% wässriger Glycerin-Lösung aufblasen. Die empfohlene Füllmenge ist auf dem Trichter des Katheters angegeben.
- Extraktion: Zur Entleerung den Trichter oberhalb des Ventils abschneiden oder mit einer Spritze ohne Nadel in das Ventil drücken, um die Drainage zu erleichtern.

UT_IPU-TUL-EN_Rev2.0 (11-23)

CE-KY-01-0202

SMS-01A-01

5. Katheter verweilen lassen: Verweildauer nach Anforderungen der Klinik und Krankenschwester.

[Kontraindikation]

Die vom Arzt als ungeeignet angesehene Bedingung.

[Vorsichtsmaßnahme]

- Verwenden Sie keine Salben oder Schmiermittel auf Erdölbasis.
- Unterschiedliche Spezifikation von Harnröhrenkatheter sollte als verschiedene Alter vor dem Gebrauch gewählt werden.
- Dieses Produkt wurde mit Ethylenoxid-Gas sterilisiert und ist nach einmaligem Gebrauch zu entsorgen.
- Wenn die Verpackung beschädigt ist, nicht verwenden.
- Die Größe und Ballonkapazität ist auf der äußeren Verpackung und dem Trichter des Katheters angegeben.
- Der Führungsdraht für die Hilfsintubation im Drainagekanal des Katheters ist bei den Kindern vorplatziert.
- Bei der Verwendung, wie die Entdeckung der Harn-Katheter, Harn-Extravasation, unzureichende Drainage, Katheter Ersatz sollte gelten Spezifikationen rechtzeitig.
- Dieses Produkt sollte von medizinischem Personal bedient werden.
- Indwelling Zeit empfehlen nicht mehr als 28 Tage.

[Symbol]



[Warning]

Die Injektion von sterilem Wasser darf die Nennkapazität des Katheters (ml) nicht überschreiten.

[Lagerung]

An einem kühlen, dunklen und trockenen Ort lagern, die Temperatur sollte nicht höher als 40 °C sein, ohne ätzende Gase und mit guter Belüftung.

[Herstellungsdatum]

Siehe inneres Verpackungsetikett

[Verfallsdatum]

Siehe inneres Verpackungsetikett

[Importer]

Urotech GmbH

Medi-Globe-Str. 1-5

83101 Rohrdorf Deutschland

[Vertriebshändler]

Urotech GmbH

Medi-Globe-Str.1-5,83101,Achenmühle,Deutschland

www.urovision-urotech.de

[Eingetragene Person]

Hersteller: HAIYAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.

Adresse: Songpodong Road, Shendang Town 314311, Haiyan, Zhejiang China

Tel: 0086-0573-86725881 0086-0573-86725885 Fax: 0086-0573-86725888

Eunitor GmbH

Kennedydamm 5 40476 Düsseldorf Deutschland

Obelis Schweizer GmbH

Ruessenstrasse 12, 6340 Baar/ZG, Schweiz

MedPath Limited

27 Old Gloucester Street, London, Vereinigtes Königreich, WC1N 3AX

[Datum der Veröffentlichung] 2023-11-10

UT_IPU-TUL-EN_Rev2.0 (11-23)

CE-KY-01-0202

SMS-01A-01



Močové katétry k jednomu použití (Foleyův katéter)

[Vlastnosti výrobku]

Pokyny k použití

Močové katétry „KANGYUAN“ k jednomu použití (Foleyův katét) se vyrábí pokročilou technologií z dovážené silikonové gumy. Výrobek má hladký povrch, nepatrnou stimulaci, velký objem slachové blány, spolehlivý balonek, je praktický a bezpečný k použití, na výběr je mnoho typů a specifikací .

[Applikovatelnost]

Výrobek byl klinicky použit k močení a vypláchnutí močového měchýře, a to vsunutím do močového měchýře prostřednictvím močové trubice.

[Parametry]

REF	Špička	Velikost	Balonek (ml)	Délka (mm)	Materiál	Lumen
ED-101003-SL	Nelatonův katét, centrální otvor	10Fr	Integrovaný	3	310	Silikon 2cestný
ED-101205-SL	Nelatonův katét, centrální otvor	12Fr	Integrovaný	5	400	Silikon 2cestný
ED-101405-SL	Nelatonův katét, centrální otvor	14Fr	Integrovaný	5	400	Silikon 2cestný
ED-101610-SL	Nelatonův katét, centrální otvor	16Fr	Integrovaný	10	400	Silikon 2cestný
ED-101810-SL	Nelatonův katét, centrální otvor	18Fr	Integrovaný	10	400	Silikon 2cestný
ED-102010-SL	Nelatonův katét, centrální otvor	20Fr	Integrovaný	10	400	Silikon 2cestný
ED-102210-SL	Nelatonův katét, centrální otvor	22Fr	Integrovaný	10	400	Silikon 2cestný
ED-102410-SL	Nelatonův katét, centrální otvor	24Fr	Integrovaný	10	400	Silikon 2cestný
ED-100803	Nelatonův katét	8Fr	Integrovaný	3	310	Silikon 2cestný
ED-101003	Nelatonův katét	10Fr	Integrovaný	3	310	Silikon 2cestný
ED-101205	Nelatonův katét	12Fr	Integrovaný	5	400	Silikon 2cestný
ED-101405	Nelatonův katét	14Fr	Integrovaný	5	400	Silikon 2cestný
ED-101610	Nelatonův katét	16Fr	Integrovaný	10	400	Silikon 2cestný
ED-101810	Nelatonův katét	18Fr	Integrovaný	10	400	Silikon 2cestný
ED-102010	Nelatonův katét	20Fr	Integrovaný	10	400	Silikon 2cestný
ED-102210	Nelatonův katét	22Fr	Integrovaný	10	400	Silikon 2cestný
ED-102410	Nelatonův katét	24Fr	Integrovaný	10	400	Silikon 2cestný
ED-440603	Nelatonův katét	6Fr	Normální	1,5-3	310	Silikon 2cestný
ED-440803	Nelatonův katét	8Fr	Normální	3	310	Silikon 2cestný
ED-441005	Nelatonův katét	10Fr	Normální	5	310	Silikon 2cestný
ED-441210	Nelatonův katét	12Fr	Normální	10	400	Silikon 2cestný
ED-441410	Nelatonův katét	14Fr	Normální	10	400	Silikon 2cestný
ED-441610	Nelatonův katét	16Fr	Normální	10	400	Silikon 2cestný
ED-441810	Nelatonův katét	18Fr	Normální	10	400	Silikon 2cestný
ED-442010	Nelatonův katét	20Fr	Normální	10	400	Silikon 2cestný
ED-442210	Nelatonův katét	22Fr	Normální	10	400	Silikon 2cestný
ED-442410	Nelatonův katét	24Fr	Normální	10	400	Silikon 2cestný
ED-401205	Temannův katét	12Fr	Integrovaný	5	400	Silikon 2cestný
ED-401405	Temannův katét	14Fr	Integrovaný	5	400	Silikon 2cestný
ED-401610	Temannův katét	16Fr	Integrovaný	10	400	Silikon 2cestný
ED-401810	Temannův katét	18Fr	Integrovaný	10	400	Silikon 2cestný
ED-402010	Temannův katét	20Fr	Integrovaný	10	400	Silikon 2cestný
ED-402210	Temannův katét	22Fr	Integrovaný	10	400	Silikon 2cestný
ED-402410	Temannův katét	24Fr	Integrovaný	10	400	Silikon 2cestný

CE-KY-01-0202

SMS-01A-01



Cathéters urinaires à usage unique (Foley)

Mode d'emploi

[Caractéristiques du produit]

Les cathéters urinaires à usage unique (Foley) de "KANGYUAN" sont fabriqués en caoutchouc silicé importé et bénéficient d'une technologie avancée. Le produit a une surface lisse, une légère stimulation, un grand volume d'apocénose, un ballonnet fiable, une utilisation sûre et pratique, plusieurs types et spécifications au choix.

[Applicabilité]

Le produit peut être utilisé cliniquement pour uriner et se doucher la vessie urinaire en l'insérant dans la vessie urinaire par l'urètre.

[Spécification]

REF	Embout	Taille	Ballon (ml)	Longueur (mm)	Matériau	Lumen	
ED-101003-SL	Nelaton, trou central	10Fr	Intégré	3	310	Silicone	2 voies
ED-101205-SL	Nelaton, trou central	12Fr	Intégré	5	400	Silicone	2 voies
ED-101405-SL	Nelaton, trou central	14Fr	Intégré	5	400	Silicone	2 voies
ED-101610-SL	Nelaton, trou central	16Fr	Intégré	10	400	Silicone	2 voies
ED-101810-SL	Nelaton, trou central	18Fr	Intégré	10	400	Silicone	2 voies
ED-102010-SL	Nelaton, trou central	20Fr	Intégré	10	400	Silicone	2 voies
ED-102210-SL	Nelaton, trou central	22Fr	Intégré	10	400	Silicone	2 voies
ED-102410-SL	Nelaton, trou central	24Fr	Intégré	10	400	Silicone	2 voies
ED-100803	Nelaton	8Fr	Intégré	3	310	Silicone	2 voies
ED-101003	Nelaton	10Fr	Intégré	3	310	Silicone	2 voies
ED-101205	Nelaton	12Fr	Intégré	5	400	Silicone	2 voies
ED-101405	Nelaton	14Fr	Intégré	5	400	Silicone	2 voies
ED-101610	Nelaton	16Fr	Intégré	10	400	Silicone	2 voies
ED-101810	Nelaton	18Fr	Intégré	10	400	Silicone	2 voies
ED-102010	Nelaton	20Fr	Intégré	10	400	Silicone	2 voies
ED-102210	Nelaton	22Fr	Intégré	10	400	Silicone	2 voies
ED-102410	Nelaton	24Fr	Intégré	10	400	Silicone	2 voies
ED-440603	Nelaton	6Fr	Normal	1,5-3	310	Silicone	2 voies
ED-440803	Nelaton	8Fr	Normal	3	310	Silicone	2 voies
ED-441005	Nelaton	10Fr	Normal	5	310	Silicone	2 voies
ED-441210	Nelaton	12Fr	Normal	10	400	Silicone	2 voies
ED-441410	Nelaton	14Fr	Normal	10	400	Silicone	2 voies
ED-441610	Nelaton	16Fr	Normal	10	400	Silicone	2 voies
ED-441810	Nelaton	18Fr	Normal	10	400	Silicone	2 voies
ED-442010	Nelaton	20Fr	Normal	10	400	Silicone	2 voies
ED-442210	Nelaton	22Fr	Normal	10	400	Silicone	2 voies
ED-442410	Nelaton	24Fr	Normal	10	400	Silicone	2 voies
ED-401205	Tiemann	12Fr	Intégré	5	400	Silicone	2 voies
ED-401405	Tiemann	14Fr	Intégré	5	400	Silicone	2 voies
ED-401610	Tiemann	16Fr	Intégré	10	400	Silicone	2 voies
ED-401810	Tiemann	18Fr	Intégré	10	400	Silicone	2 voies
ED-402010	Tiemann	20Fr	Intégré	10	400	Silicone	2 voies
ED-402210	Tiemann	22Fr	Intégré	10	400	Silicone	2 voies
ED-402410	Tiemann	24Fr	Intégré	10	400	Silicone	2 voies

[Mode d'emploi]

- Lubrification : Lubrifier généreusement l'extrémité et la tige du cathéter avant de l'insérer.
- Insertion : Insérer avec précision l'extrémité du cathéter dans la vessie (ce qui est normalement indiqué par l'écoulement d'urine), puis sur 3 cm supplémentaires pour s'assurer que le ballon est également à l'intérieur de la vessie.
- Gonflement de l'eau : A l'aide d'une seringue sans aiguille, gonfler le ballon avec de l'eau distillée stérile ou une solution aqueuse de glycérine à 5 % ou 10 %. Le volume recommandé est indiqué sur l'entonnoir du cathéter.
- Extraction : Pour le dégonflage, couper l'entonnoir de gonflage au-dessus de la vanne ou, à l'aide d'une seringue sans aiguille, pousser dans la vanne pour faciliter le drainage.

UT_FUL-TUL-EN_Ren2.0 (11-23)

CE-KY-01-0202

SMS-01A-01



Urinekatheters voor éénmalig gebruik (Foley)

Gebruiksaanwijzing

[Producteigenschappen]

"KANGYUAN" Urinekatheters voor éénmalig gebruik (Foley) zijn gemaakt van geïmporteerd siliconenrubber met geavanceerde technologie. Het product heeft een glad oppervlak, lichte stimulatie, groot apocénose-volume, betrouwbare ballon, geschikt om veilig te gebruiken, veelvoud van soorten en specificaties voor keuze.

[Toepasbaarheid]

Het product kan klinisch worden gebruikt om te plassen en te douchen door het in te brengen in de urineblaas via de urinebuis.

[Specificatie]

REF	Uiteinde	Grootte	Ballon (ml)	Lengte (mm)	Materiaal	Lumen	
ED-101003-SL	Nelaton, middengat	10Fr	Geïntegreerd	3	310	Siliconen	2-weg
ED-101205-SL	Nelaton, middengat	12Fr	Geïntegreerd	5	400	Siliconen	2-weg
ED-101405-SL	Nelaton, middengat	14Fr	Geïntegreerd	5	400	Siliconen	2-weg
ED-101610-SL	Nelaton, middengat	16Fr	Geïntegreerd	10	400	Siliconen	2-weg
ED-101810-SL	Nelaton, middengat	18Fr	Geïntegreerd	10	400	Siliconen	2-weg
ED-102010-SL	Nelaton, middengat	20Fr	Geïntegreerd	10	400	Siliconen	2-weg
ED-102210-SL	Nelaton, middengat	22Fr	Geïntegreerd	10	400	Siliconen	2-weg
ED-102410-SL	Nelaton, middengat	24Fr	Geïntegreerd	10	400	Siliconen	2-weg
ED-100803	Nelaton	8Fr	Geïntegreerd	3	310	Siliconen	2-weg
ED-101003	Nelaton	10Fr	Geïntegreerd	3	310	Siliconen	2-weg
ED-101205	Nelaton	12Fr	Geïntegreerd	5	400	Siliconen	2-weg
ED-101405	Nelaton	14Fr	Geïntegreerd	5	400	Siliconen	2-weg
ED-101610	Nelaton	16Fr	Geïntegreerd	10	400	Siliconen	2-weg
ED-101810	Nelaton	18Fr	Geïntegreerd	10	400	Siliconen	2-weg
ED-102010	Nelaton	20Fr	Geïntegreerd	10	400	Siliconen	2-weg
ED-102210	Nelaton	22Fr	Geïntegreerd	10	400	Siliconen	2-weg
ED-102410	Nelaton	24Fr	Geïntegreerd	10	400	Siliconen	2-weg
ED-440603	Nelaton	6Fr	Normaal	1,5-3	310	Siliconen	2-weg
ED-440803	Nelaton	8Fr	Normaal	3	310	Siliconen	2-weg
ED-441005	Nelaton	10Fr	Normaal	5	310	Siliconen	2-weg
ED-441210	Nelaton	12Fr	Normaal	10	400	Siliconen	2-weg
ED-441410	Nelaton	14Fr	Normaal	10	400	Siliconen	2-weg
ED-441610	Nelaton	16Fr	Normaal	10	400	Siliconen	2-weg
ED-441810	Nelaton	18Fr	Normaal	10	400	Siliconen	2-weg
ED-442010	Nelaton	20Fr	Normaal	10	400	Siliconen	2-weg
ED-442210	Nelaton	22Fr	Normaal	10	400	Siliconen	2-weg
ED-442410	Nelaton	24Fr	Normaal	10	400	Siliconen	2-weg
ED-401205	Tiemann	12Fr	Geïntegreerd	5	400	Siliconen	2-weg
ED-401405	Tiemann	14Fr	Geïntegreerd	5	400	Siliconen	2-weg
ED-401610	Tiemann	16Fr	Geïntegreerd	10	400	Siliconen	2-weg
ED-401810	Tiemann	18Fr	Geïntegreerd	10	400	Siliconen	2-weg
ED-402010	Tiemann	20Fr	Geïntegreerd	10	400	Siliconen	2-weg
ED-402210	Tiemann	22Fr	Geïntegreerd	10	400	Siliconen	2-weg
ED-402410	Tiemann	24Fr	Geïntegreerd	10	400	Siliconen	2-weg

[Gebruiksaanwijzing]

- Sneermiddel: sneer het uiteinde en de schacht van de katheter royaal voor het inbrengen.
- Inbrengen: breng het uiteinde van de katheter voorzichtig in de blaas (normaal aangegeven door urinestroom) en dan nog eens 3 cm om ervoor te zorgen dat de ballon er ook in zit.
- Met water opblazen: gebruik een spuit zonder naald om de ballon op te blazen met steriel gedestilleerd water of 5%, 10% glycerine wateroplossing indien megeleverd. Het aanbevelen te gebruiken volume is aangegeven op de trechter van de katheter.
- Extractie: snijd voor het heeglaten de opblaasrechter boven het ventiel af of druk met een injectiespuit zonder naald in het ventiel om de afvoer te vergemakkelijken.

UT_FUL-TUL-EN_Ren2.0 (11-23)

CE-KY-01-0202

SMS-01A-01

5. Durée de séjour du cathéter : la durée de séjour correspond aux exigences de la clinique et de l'infirmière.


[Contre-indication]

L'est inadéquat considéré par le médecin.

[Précaution]

- N'utilisez pas de pommades ou de lubrifiants à base de pétrole.
- Les différentes spécifications du cathéter urétral doivent être choisies en fonction de l'âge avant l'utilisation.
- Ce produit a été stérilisé au gaz d'oxyde d'éthylène et doit être jeté après un seul usage.
- Si l'emballage est endommagé, ne l'utilisez pas.
- La taille et la capacité du ballon sont indiquées sur l'emballage extérieur et sur l'entonnoir du cathéter.
- Le fil guide pour l'intubation auxiliaire dans le canal de drainage du cathéter est placé à l'avance chez les enfants.
- En cours d'utilisation, en cas de découverte du cathéter urinaire, d'extravasation urinaire, de drainage inadéquat, le remplacement du cathéter doit faire l'objet de spécifications applicables en temps opportun.
- Ce produit doit être utilisé par le personnel médical.
- La durée d'utilisation recommandée n'excède pas 28 jours.

[Symbole]

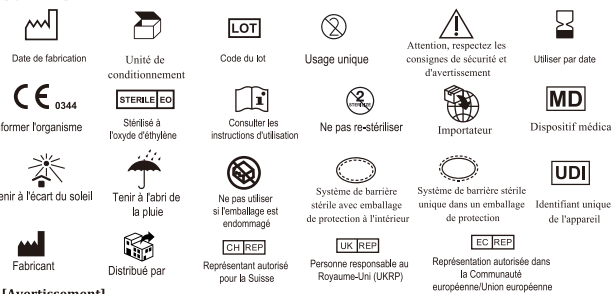

[Avertissement]

L'injection d'eau stérile ne doit pas dépasser la capacité nominale du cathéter [ml].

[Stockage]

Stockez dans un endroit frais, sombre et sec, la température ne doit pas dépasser 40 °C, sans gaz corrosif et avec une bonne ventilation.

[Date de fabrication]

Se reporter à l'étiquette de l'emballage intérieur

[Date de péremption]

Se reporter à l'étiquette de l'emballage intérieur

[Importateur]

Urotech GmbH Medi-Globe-Str.

1-5 83101 Rohrdorf

Allemagne

[Distributeur]

Urotech GmbH

Medi-Globe-Str. 1-5, 83101, Achenmühle, Allemagne

www.urovision-urotech.de

[Personne enregistrée]

Fabricant: HAIYAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.

Adresse : Rue Songpodong, ville de Shendang 314311, Haiyan, Zhejiang China

Tel: 0086-0573-86725881 0086-0573-86725885 Fax: 0086-0573-86725888

EC REP

Eumitor GmbH

Kennedydamm 5 40476 Düsseldorf Allemagne

CH REP

Obelis Swiss GmbH

Ruessenstrasse 12, 6340 Baar/ZG, Suisse

UK REP

MedPath Limited

27 Ancienne Avenue Gloucester, Londres, Royaume-Uni, WC1N 3AX

[Date de publication]2023-11-10

UT_FUL-TUL-EN_Ren2.0 (11-23)

CE-KY-01-0202

SMS-01A-01

5. Verblifskatheter: de verblifsduur is afhankelijk van de vereisten van de kliniek en de verpleegkundige.

[Contra-indicatie]

De ongeschikte aandoening die door de arts wordt overwogen.

[Voorzorgsmaatregelen]

- Gebruik geen zalven of smeermiddelen op basis van petroleum.
- Verschillende specificaties van urethrale katheters moeten voor gebruik worden gekozen afhankelijk van de verschillende leeftijden.
- Dit product is gesteriliseerd met ethyleenoxidegas en moet na eenmalig gebruik worden weggegooid.
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.
- De grootte en capaciteit van de ballon is aangegeven op de buitenkant van de eenheidsverpakking en de trechter van de katheter.
- De geleidingsdraad voor de hulpintubatie in het afvoerkanaal van de katheter is vooraf bij de kinderen geplaatst.
- Bij gebruik van zoals het detecteren van de urinekatheter, urine-extravasatie, onvoldoende afvoer, dient de vervanging van de katheter tijdig te worden toegepast.
- Dit product moet worden bediend door medisch personeel.
- Verbliftijd aanbevelen voor niet meer dan 28 dagen.

[Symbool]



[Waarschuwing]

De injectie van steriel water mag de nominale capaciteit aangegeven op de katheter (ml) niet overschrijden.

[Opslag]

Koel, donker en droog bewaren. De temperatuur mag niet hoger zijn dan 40 °C, uit de buurt van bijtende gassen houden en bewaren bij goede ventilatie.

[Productiedatum]

Zie het etiket op de binnenverpakking.

[Houdbaarheidsdatum]

Zie het etiket op de binnenverpakking.

[Importeur]

Urotech GmbH Medi-Globe-Str. 1-5

83101 Rohrdorf Duitsland

[Distributeur]

Urotech GmbH

Medi-Globe-Str. 1-5, 83101, Achenmühle, Allemagne

www.urovision-urotech.de

[Geregistreerd persoon]

Fabrikant: HAIYAN KANGYUAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

Adres: Songpodong Road, Shendang Town 314311, Haiyan, Zhejiang China

Tel: 0086-0573-86725881 0086-0573-86725885 Fax: 0086-0573-86725888

EC REP

Eumitor GmbH

Kennedydamm 5 40476 Düsseldorf, Duitsland

CH REP

Obelis Swiss GmbH

Ruessenstrasse 12, 6340 Baar/ZG, Zwitserland

UK REP

MedPath Limited

27 Old Gloucester Street, London, Verenigd Koninkrijk, WC1N 3AX

[Productiedatum]2023-11-10

UT_FUL-TUL-EN_Ren2.0 (11-23)

CE-KY-01-0202

SMS-01A-01



Cateteri Urinari Monouso (Foley)

Istruzioni d'uso

[Caratteristiche del prodotto]

I cateteri urinari monouso (Foley) "KANGYUAN" sono realizzati in gomma silconica di importazione di tecnologia avanzata. Il prodotto è dotato di una superficie liscia, di leggera stimolazione, di un elevato volume di apocenos, di un palloncino resistente, è comodo da usare in sicurezza, ha diverse tipologie e specifiche tra cui scegliere.

[Applicabilità]

Il prodotto può essere utilizzato clinicamente per urinare e irrigare la vescica inserendolo nella vescica attraverso l'uretra.

[Specifiche]

REF	Punta	Dimension	Palloncino (ml)	Lunghezza (mm)	Materiale	Lume	
ED-101003-SL	Nelaton, foro centrale	10Fr	Integrato	3	310	Silicone	2 vie
ED-101205-SL	Nelaton, foro centrale	12Fr	Integrato	5	400	Silicone	2 vie
ED-101405-SL	Nelaton, foro centrale	14Fr	Integrato	5	400	Silicone	2 vie
ED-101610-SL	Nelaton, foro centrale	16Fr	Integrato	10	400	Silicone	2 vie
ED-101810-SL	Nelaton, foro centrale	18Fr	Integrato	10	400	Silicone	2 vie
ED-102010-SL	Nelaton, foro centrale	20Fr	Integrato	10	400	Silicone	2 vie
ED-102210-SL	Nelaton, foro centrale	22Fr	Integrato	10	400	Silicone	2 vie
ED-102410-SL	Nelaton, foro centrale	24Fr	Integrato	10	400	Silicone	2 vie
ED-100803	Nelaton	8Fr	Integrato	3	310	Silicone	2 vie
ED-101003	Nelaton	10Fr	Integrato	3	310	Silicone	2 vie
ED-101205	Nelaton	12Fr	Integrato	5	400	Silicone	2 vie
ED-101405	Nelaton	14Fr	Integrato	5	400	Silicone	2 vie
ED-101610	Nelaton	16Fr	Integrato	10	400	Silicone	2 vie
ED-101810	Nelaton	18Fr	Integrato	10	400	Silicone	2 vie
ED-102010	Nelaton	20Fr	Integrato	10	400	Silicone	2 vie
ED-102210	Nelaton	22Fr	Integrato	10	400	Silicone	2 vie
ED-102410	Nelaton	24Fr	Integrato	10	400	Silicone	2 vie
ED-440603	Nelaton	6Fr	Normale	1.5-3	310	Silicone	2 vie
ED-440803	Nelaton	8Fr	Normale	3	310	Silicone	2 vie
ED-441005	Nelaton	10Fr	Normale	5	310	Silicone	2 vie
ED-441210	Nelaton	12Fr	Normale	10	400	Silicone	2 vie
ED-441410	Nelaton	14Fr	Normale	10	400	Silicone	2 vie
ED-441610	Nelaton	16Fr	Normale	10	400	Silicone	2 vie
ED-441810	Nelaton	18Fr	Normale	10	400	Silicone	2 vie
ED-442010	Nelaton	20Fr	Normale	10	400	Silicone	2 vie
ED-442210	Nelaton	22Fr	Normale	10	400	Silicone	2 vie
ED-442410	Nelaton	24Fr	Normale	10	400	Silicone	2 vie
ED-401205	Tiemann	12Fr	Integrato	5	400	Silicone	2 vie
ED-401405	Tiemann	14Fr	Integrato	5	400	Silicone	2 vie
ED-401610	Tiemann	16Fr	Integrato	10	400	Silicone	2 vie
ED-401810	Tiemann	18Fr	Integrato	10	400	Silicone	2 vie
ED-402010	Tiemann	20Fr	Integrato	10	400	Silicone	2 vie
ED-402210	Tiemann	22Fr	Integrato	10	400	Silicone	2 vie
ED-402410	Tiemann	24Fr	Integrato	10	400	Silicone	2 vie